

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

PISTOLET DO MASAŻU Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA



KD3080 / KD3081 / KD3082

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI


**Niniejszy dokument zawiera instrukcje w zakresie bezpieczeństwa oraz obsługi
oraz informacje na temat gwarancji.**

Dokument wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w suchym miejscu.



SPECYFIKACJA

1. Bezsztotkowy silnik o wysokim momencie obrotowym z technologią cichego poślizgu
2. Wyjmowany zwalniacz baterii
3. Akumulator litowo-jonowy (ponad 2 godziny pracy na jednym ładowaniu)
4. Ustawienia wielu prędkości dla optymalnego ciśnienia
5. Bezprzewodowy i lekki (2,5 funta)
6. Włącznik/wyłącznik zasilania
7. Wymienne aplikatory

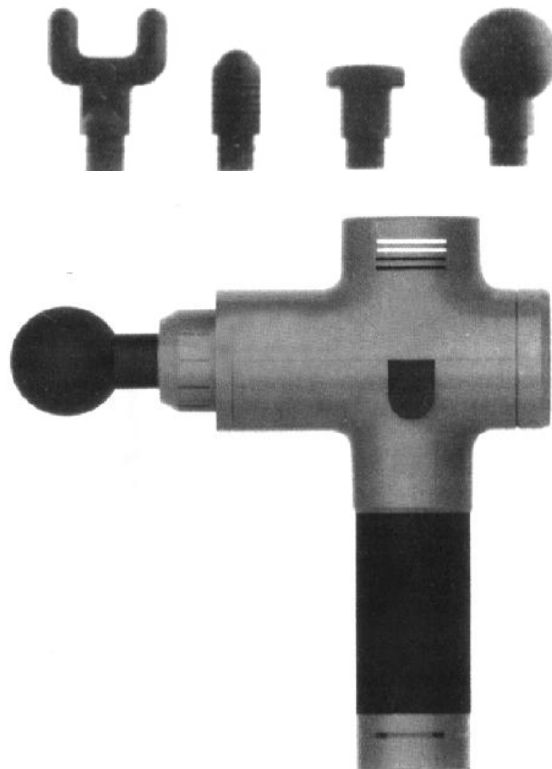

MODEL	DANE TECHNICZNE
<p style="text-align: center;">KD3080</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 20 różnych prędkości • Moc 250W • Akumulator litowo-jonowy • Amplituda 12mm • Czas ładowania do 60minut • Czas pracy do 6h – w zależności od siły nacisku, prędkości • Hałas 45-65db • Wyświetlacz LCD • 6 wymiennych końcówek + 2 gratis: U-ształtna, płaska, łopatkowa, piła, piłka XL, pocisk, końcówka pneumatyczna, łuk • Zasilacz w zestawie • Walizka do przechowywania
<p style="text-align: center;">KD3081</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 30 różnych prędkości • Moc 125W • Akumulator litowo-jonowy • Amplituda 12mm • Czas ładowania do 1-1,5h • Czas pracy do 6h – w zależności od siły nacisku, prędkości • Hałas 45db • Wyświetlacz LCD • 9 głowic wymiennych: okrągła mała, łopatkowa, podwójna, pocisk, rozgrzewająca, powietrzna, płaska, punktowa, półksiężycowa
<p style="text-align: center;">KD3082</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 30 różnych prędkości • Moc 125W • Akumulator litowo-jonowy • Amplituda 12mm • Czas ładowania 1-1,5h • Czas pracy od 1 do 6h – w zależności od siły nacisku, prędkości • Hałas 45db • Wyświetlacz LCD • 8 różnych końcówek: u-ształtna, płaska, łopatkowa, piłka, korkowa, pocisk, pneumatyczna, łuk •

ŁADOWANIE

- Całkowicie naładuj baterię przez maksymalnie sześć godzin przed pierwszym użyciem po podłączeniu lub odłączeniu od urządzenia
- Aby naładować, podłącz końcówkę DC dostarczonego zasilacza 24 V do portu ładowania akumulatorów i podłącz kabel strony AC do gniazdka ściennego
- Pasek LED na kontrolkach akumulatora pulsuje, wskazując poziom naładowania akumulatora i wskazując aktywne ładowanie.
- Gdy akumulator jest podłączony, diody LED na urządzeniu migają, wskazując poziom naładowania akumulatora i aktywne ładowanie.
- Pełne naładowanie jest sygnalizowane, gdy wszystkie diody LED przestają migać i pozostają w pełni oświetlone.
- Akumulator można ładować przez krótki czas i do niskiego poziomu naładowania.
- Nie zaleca się całkowitego rozładowania baterii do poziomu czerwonej diody LED
- Średni czas pracy wynosi ponad 2 godziny, w zależności od poziomu prędkości i nacisku stosowanego podczas użytkowania.

OBSŁUGA

- Wyrównaj i przymocuj akumulator do podstawy urządzenia – upewnij się, że jest bezpiecznie zablokowany na swoim miejscu.
- Włącz urządzenie, przesuwając przełącznik zasilania na spodzie baterii do pozycji ON. Wyłącz urządzenie, ustawiając wyłącznik zasilania w pozycji OFF.
- Gdy wyłącznik zasilania jest w pozycji ON, naciśnij raz przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie na poziom pierwszy, dwa razy, aby włączyć urządzenie na poziom drugi i trzy razy, aby włączyć poziom trzeci. Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania wyłączy urządzenie. Niebieskie diody LED wskażą odpowiedni poziom mocy.
- Po wyłączeniu urządzenia całkowicie włożyć aplikator, naciskając. Wyjąć, wyciągając.
- Prześlij wiadomość do żądanej części ciała z żądaną prędkością, stosując nacisk w razie potrzeby.
- Aby wyjąć baterię, delikatnie naciśnij kciukiem przycisk zwalniania baterii. Mocno w dół na akumulatorze / hadle drugą ręką.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Do czyszczenia urządzenia używaj lekko wilgotnej wiewy, a następnie osusz miękką ściereczką
- W celu przechowywania lub podróży wyjmij baterię i przechowuj w dostarczonym pudełku kartonowym

ZASTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA I PRZESTROGA

- Nie zanurzaj w wodzie, trzymaj z dala od płynów lub źródeł ciepła. Utrzymuj porty wentylacyjne wolne od kurzu i zanieczyszczeń
- Nie wykręcaj śrub ani nie próbuj demontować
- Nie używaj urządzenia w sposób ciągły przez dłużej niż godzinę, pozwól urządzeniu odpocząć przez 30 minut przed ponownym użyciem
- Odłącz ładowarkę od akumulatora urządzenia po naładowaniu lub przed użyciem
- Tylko dla dorosłych. Nie używać w przypadku obrażeń. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała. Ten produkt musi być używany zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- Tylko dla dorosłych.
- Stosować wyłącznie na suchą czystą powierzchnię ciała na ubraniu, lekko naciskając i przesuając po ciele przez około 60 sekund na dany obszar.
- Używaj hiperwoltu tylko na tkanki miękkie ciała zgodnie z potrzebami, bez powodowania bólu lub dyskomfortu. Nie stosować na słuch, dłoń lub kości na ciele.
- Używaj tylko takich aplikatorów, które zapewniają najlepszy pożądany efekt.
- Siniaki mogą wystąpić niezależnie od ustawienia kontroli lub zastosowanego nacisku. Często sprawdzaj zagrożone obszary i natychmiast zatrzymuj się przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Trzymaj palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonka i tylnej części aplikatora, ponieważ może to spowodować przytrzaśnięcie.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych pistoletu do masażu.
- Nie zanurzaj w wodzie ani nie pozwól, aby woda dostała się do otworów wentylacyjnych pistoletu do masażu
- Nie upuszczaj ani nie myl pistoletu do masażu
- Ładować tylko za pomocą dostarczonej ładowarki pistoletu do masażu 26 VDC
- Dokładnie obejrzyj urządzenie i baterię przed każdym użyciem.
- Nie manipuluj ani nie modyfikuj pistoletu masującego w żaden sposób.
- Nigdy nie pozostawiaj działającego lub ładującego się pistoletu informacyjnego bez podłączenia

Nie używaj pistoletu do masażu ani żadnego urządzenia wibracyjnego bez uprzedniej zgody lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych warunków ma zastosowanie.

Ciąża, cukrzyca z powikłaniami, takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, zużycie rozruszników serca, niedawna operacja, padaczka lub migreny. przepukliny dysków, kręgoszyk spondylolityczny lub spondyloza, niedawne wymiany stawów lub wkładki domaciczne. Osobom słabym i dzieciom podczas korzystania z urządzenia wibracyjnego powinna towarzyszyć osoba dorosła. Te przeciwwskazania nie oznaczają, że nie możesz używać urządzenia wibrującego lub ćwiczącego, ale radzimy najpierw skonsultować się z lekarzem

Trwają badania nad wpływem ćwiczeń wibracyjnych na określone zaburzenia medyczne. Spowoduje to prawdopodobnie skrócenie listy przeciwwskazań, jak pokazano powyżej. Praktyczne doświadczenie pokazało, że w wielu przypadkach integracja ćwiczeń wibracyjnych w realnym planie ma charakter doradczy. Należy to zrobić za radą i w towarzystwie lekarza, specjalisty lub fizjoterapeuty.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: Foreintrade S.A

Adres upoważnionego przedstawiciela: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Pistolet do masażu - zestaw

Model: KD3080 KD3081 KD3082

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU EMC Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Certyfikat o numerze PTC210511300701E-EM01 wydany przez Precise Testing & Certification Guangdong Co., Ltd (Building 1, no. 6, Tongxin Road, Dongcheng Street, Dongguan, Guangdong, China) z 26 maja 2021.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui; JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, TARCZYN, 16.06.2023